

# СОВЕТЫ ПО КОМПЛЕКТАЦИИ ТАКТИЧЕСКОЙ АПТЕЧКИ

## 1. Жгут артериальный (2-3 шт.)

<b>Эсмарха резиновый</b>	<b>Гепоглос силиконовый</b>
Предназначение: остановка АРТЕРИАЛЬНОГО кровотечения	Предназначение: остановка АРТЕРИАЛЬНОГО кровотечения
	
<b>Плюсы:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ДЛИННЫЙ!!!! Можно остановить кровотечение из любого отдела доступного для жгута</li> </ul>	<b>Плюсы:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ДЛИННЫЙ!!!! Можно остановить кровотечение из любого отдела доступного для жгута</li> <li>• Прочный, надежный, долговечный</li> </ul>
<b>Минусы:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Требуется особые условия хранения, при не правильном и длительном хранении разлагается и рвется в самый ответственный момент.</li> <li>• Скользит в руках если они в крови.</li> </ul>	<b>Минусы:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Скользит в руках если они в крови.</li> </ul>
<b>Турникет</b>	<b>Жгут Альфа</b>
Предназначение: остановка АРТЕРИАЛЬНОГО кровотечения	Предназначение: остановка АРТЕРИАЛЬНОГО кровотечения
	
<b>Плюсы:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Удобный для использования</li> </ul>	<b>Плюсы:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Рефлёный, в руках не скользит</li> </ul>
<b>Минусы:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не достаточная длина для остановки кровотечения из сосудов шеи</li> </ul>	<b>Минусы:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Короткий, подходит только для наложения на руки или худые ноги</li> </ul>
<b>Жгут из резиновой трубки</b>	<b>Жгут венозный</b>
Предназначение: остановка АРТЕРИАЛЬНОГО кровотечения	Предназначение: внутривенное введение лекарственных средств и забор венозной крови

	
<p>Плюсы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Компактный</li> </ul>	<p><b>НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОСТАНОВКИ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ, а лишь для взятия венозной крови или внутривенного введения лекарственных средств</b></p>
<p>Минусы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Конечность после его неложения, почти наверняка пойдет на ампутацию</li> </ul>	

## 2. Индивидуальный перевязочный пакет – 1 шт.

Индивидуальный перевязочный пакет <b>МАРЛЕВЫЙ</b>	Индивидуальный перевязочный пакет <b>ЭЛАСТИЧНЫЙ</b>
Предназначение: перевязка ран	Предназначение: перевязка ран
	
<p>Плюсы:</p> <p>Не скользкий клеенчатый пакет</p>	<p>Плюсы:</p> <p>Эластичный материал (удобно накладывать)</p> <p>Дополнительное пережатие кровоточащих сосудов</p> <p>Вспомогательные крепления</p>
<p>Легко рвется при наложении</p> <p>Требуется много оборотов сделать при наложении</p> <p>Не тянется, поэтому спадает с туловища</p> <p>Ограничивает экскурсию грудной клетки при дыхании</p>	<p>Минусы</p> <p>Скользкая поверхность герметичного пакета</p>


## 3. Ножницы (1 шт.)

Ножницы тактические	Ножницы по Листеру
Предназначение: разрезание одежды, перевязочных средств и прочего	Предназначение: разрезание одежды, перевязочных средств и прочего

	
<p>Плюсы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Легкие</li> <li>• Имеют выступ на нижнем режущем полотне для защиты кожи от повреждений</li> <li>• Имеют изогнутую форму для облегчения разрезания ткани</li> <li>• Имеют пилящую поверхность на нижнем режущем полотне для лучшего режущего эффекта</li> <li>• Имеют цепляющее приспособление, чтобы зафиксировать их на одежде или рюкзаке</li> <li>• Лёгкие</li> </ul>	<p>Плюсы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Имеют выступ на нижнем режущем полотне для защиты кожи от повреждений</li> <li>• Имеют изогнутую форму для облегчения разрезания ткани</li> </ul>
<p>Минусы отсутствуют</p>	<p>Минусы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тяжелые</li> <li>• Легко потерять в процессе оказания помощи</li> </ul>

#### Ножницы канцелярские

Предназначение: разрезание бумаги, картона, перерезание ниток

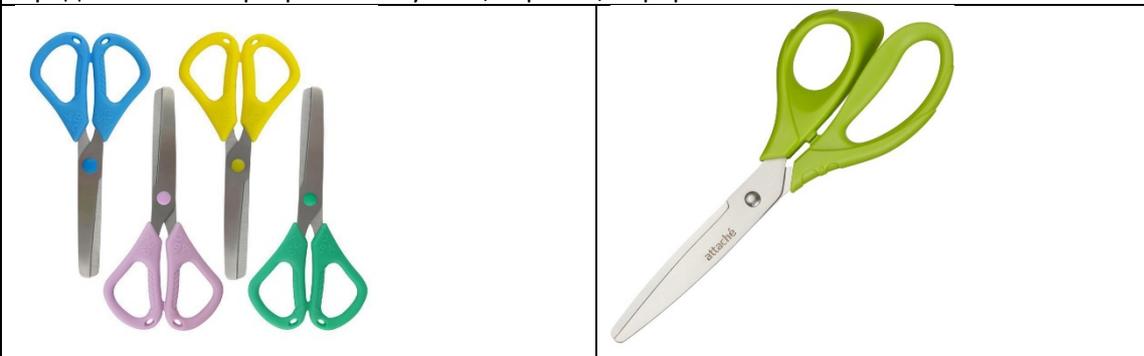

**НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

## 4. Декомпрессионная игла (1 шт.)

#### Декомпрессионная игла

Предназначение: спуск воздуха или крови из грудной полости



Плюсы:

- Спасает жизнь раненного в грудную клетку

Минусы:

- Без специальной подготовки выполнить почти не реально или приведет к серьезным повреждениям

## 5. Кровоостанавливающие средства (по 1 шт.)

<p><b>Гемостатический аппликатор гранул Элларга</b></p>	<p><b>Гемостатическая губка</b></p>
<p>Предназначение: Остановка кровотечений из пулевых отверстий (рук и ног)</p>	<p>Предназначение: Остановка кровотечений из поверхностных ран</p>
	
<p>Плюсы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Удобное введение кровоостанавливающих гранул в раневой канал</li> <li>• Быстрая остановка кровотечений из пулевого канала</li> </ul>	<p>Плюсы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Быстрая остановка поверхностного кровотечения</li> <li>• Предотвращение инфицирования раневой поверхности</li> </ul>
<p>Минусы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нельзя использовать для тампонады полостей (грудной и брюшной)</li> </ul>	<p>Минусы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не удобна для тампонирования раневого канала</li> </ul>
<p><b>Тампон женский гигиенический</b></p>	<p><b>Марлевая лента</b></p>
<p>Предназначение: экстремальный вариант при пулевых ранениях рук и ног</p>	<p>Предназначение: тампонирование раневого канала</p>

	
<p>Плюсы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Удобный способ введения тампона</li> </ul>	<p>Плюсы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Можно сделать самостоятельно из бинта</li> </ul>
<p>Минусы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не предназначен непосредственно для тампонады раневых каналов</li> </ul>	<p>Минусы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Требуется навык формирования ленты и введения перевязочного средства внутрь раневого канала</li> <li>• Затратно по времени для новичков</li> <li>• Риск загрязнения перевязочного материала в результате разматывания</li> </ul>
<p><b>ВАЖНО!!!</b> Применяется <b>ТОЛЬКО</b> в экстренных случаях, когда нет ни чего другого. Использовать тампон <b>ТОЛЬКО</b> из нетканного волокна и при наличии аппликатора, облегчающего ввод тампона. Применение <b>ВАТЫ ЗАПРЕЩЕНО!!!</b></p>	

## 6. Термозащита (1 шт.)

<p><b>Термоодеяло</b></p>	
<p>Предназначение: сохранение тепла / укрытие от солнечных лучей</p>	
	
<p>Плюсы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Влаго- и ветронепроницаемо</li> <li>Компактный размер (в сложенном состоянии помещается на ладони)</li> <li>Легкое</li> <li>Прочное</li> <li>При отрицательных температурах остается эластичным</li> </ul>	
<p>Дополнительный бонус:</p>	

Сохраняет дольше скоропортящиеся продукты

## 7. Грелка (1 шт.)

Грелка солевая химическая многоразовая

Предназначение: согрев



Плюсы:

- Быстрый источник тепла
- Многоразовое использование
- Компактный размер (правда, есть разных размеров и форм, в подсумок берите такие, как на картинке), с ладонь человека

Минусы:

- Для возврата в исходное состояние, надо отваривать в воде около 10-15 минут
- Быстро остывает без дополнительных, удерживающих тепло вещей.

## 8. Перчатки (2 пары)

Перчатки медицинские

Перчатки Хозяйственные

Предназначение: профилактика заражения инфекциями передающимися через кровь



Плюсы:

- Защита от инфекции
- Чистые руки

Минусы:

- Рвутся
- Тяжело натягиваются

Минусы:

- Неудобство при манипуляциях

## 9. Бинты (2-3 шт):

**Бинты марлевые широкие и средние**

Предназначение: перевязка ран



## 10. Пластырь (1 катушка и несколько штук бактерицидных):

**Пластырь бактерицидный**

Предназначение: изоляция повреждений (ранки, мозоли...)



**Лейкопластырь катушечный**

Предназначение: фиксация перевязочного материала



## 11. Салфетки (1 уп. + 2 шт.)

Салфетки марлевые:	Салфетка антисептическая:
Предназначение: сохранение чистоты раны, впитывание крови	Предназначение: Обеззараживание кожи
	


## 12. Прочие необходимые вещи

Косынка	Маркер
Предназначение: закрепление перевязочного материала, подвешивание поврежденной руки, подмена жгута	Предназначение: запись времени наложения жгута, прочие пометки
	
Булавка	Лекарственные средства прописанные по имеющимся заболеваниям
Предназначение: фиксация чего-либо	Предназначение: поддержание здоровья



### Комплект для индивидуальной аптечки

Предназначение: экстренная помощь

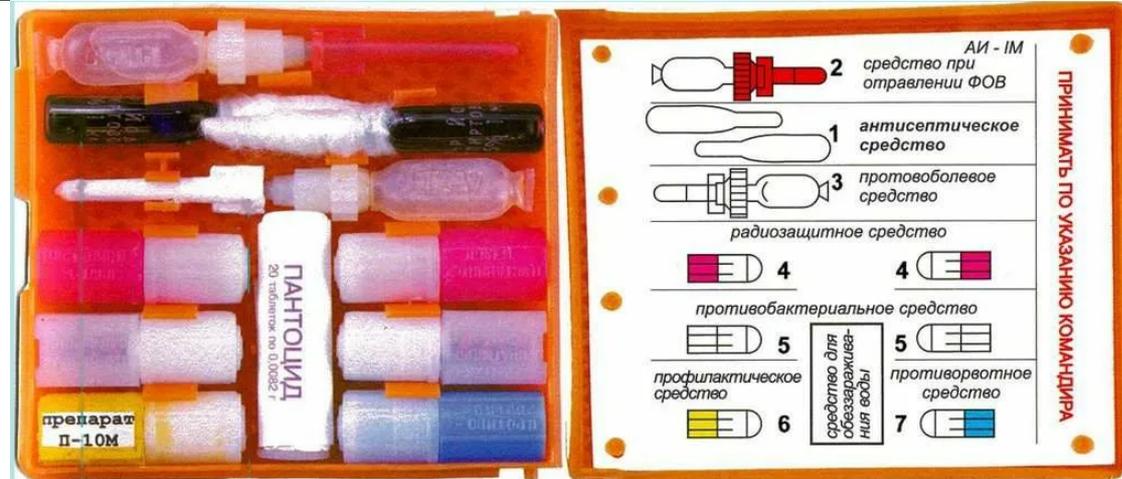

Выдается военнослужащим участвующим в боевых действиях

### Скотч армированный

Предназначение: фиксация



Рекомендуем при себе иметь 2 м армированного скотча, наклеяного на вощеную бумагу и сложенный гормошкой (зиг-загом)

### Подсумок

